

TensioMed TensioDay™

Validált pontosságú ABPM eszköz



Bluetooth

24h

Minőséggel az egészségért

Minőséggel az egészségért





A TensioDay™ ABPM a klinikai és kutatási követelményeknek egyaránt kiválóan megfelelő, a British Hypertension Society és az Association for the Advancement of Medical Instrumentation standardjai szerint validált professzionális műszer. Kompakt, megbízható, könnyű ABPM készülék **bluetooth kommunikációval**. A hozzá tartozó felhasználóbarát szoftver által készített átfogó statisztikák segítségével a hipertónia kezelésének hatékony eszköze.

TENSIO MED®

Jellemzői

- Vezeték nélküli kommunikáció – egyszerűen és kényelmesen használható
- Prémium minőség - BHS & AAMI klinikai validációja: (A/A)
- Egyszerű programozhatóság- Számítógépről vagy a műszerről is
- Költséghatékony – kimagasló minőség elérhető áron
- Gyors és kényelmes – csendes működése elősegíti a betegek komfortérzetét
- 2 év garancia a műszerre, 12 hónap a tartozékokra
- Átfogó rendelőintézeti adatok vagy hozzáadott orvosi adatok megadhatók – kardiovaszkuláris rizikófaktor számítás (Framingham)
- Statisztikai összegzés: átlag, minimum- és maximumértékek, szórás, diurnális index, hipertóniás időindex (percent time elevation PTE), hipertóniás nyomásterhelés (blood pressure load) és artériás középnyomás
- Telemedicinális alkalmazhatóság
- 72 órás programozhatóság
- 1000 mérés/adat tárolása

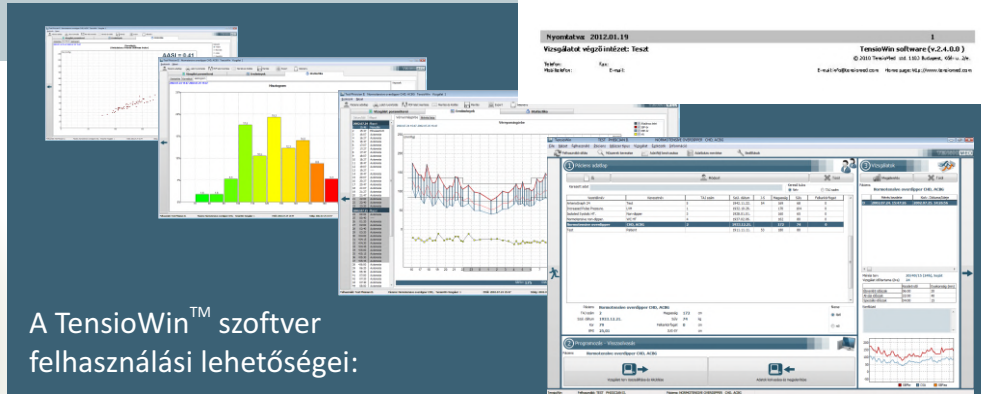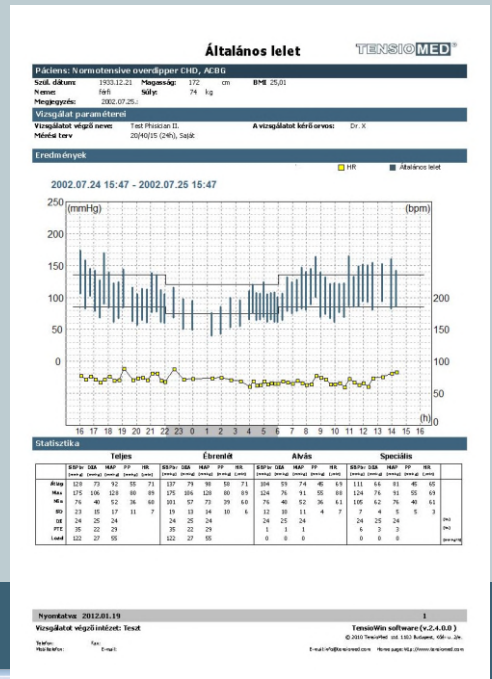

A TensioDay™ ABPM szett tartalma:

- 24 órás ambuláns vérnyomásmérő készülék
- TensioWin szoftver – telepítő CD
- Egy standard és egy alternatív felnőtt méretű mandzsetta
- Bluetooth adapter
- 4 db tartós elem

Műszaki leírás

Tápellátás:	Négy hosszú élettartamú alkáli elem vagy tölthető akkumulátor, AA méret
Áramtűrés-védelem:	A készülék belső áramellátású, telepes táplálással
Áramtűrés-védelem osztálya:	CF típusú páciensrész
Kijelző:	folyadékkristályos kijelző (LCD)
Adattárolás:	EEPROM
Adatátvitel:	Rádió, Bluetooth v2.0s
Környezeti hőmérséklet:	10-40 °C
Méret:	116x94x47mm

Súly (beleértve az elemeket):	250g
A vérnyomásmérés módja:	oszcillometriás módszer
Mintavétel frekvenciája:	200Hz
Vérnyomásmérés határértékei:	30-280Hgmm
Statikus pontosság:	± 3mmHg vagy ±2% -a a mért értéknek (Stabilitás 2 év)
Nyomásérzékelő:	piezo-rezisztív
Felfújás:	Automatikus motoros pumpa
Biztonság:	Maximum mandzsettanomás: 280mmHg
Az eszköz működése:	automata, lépcsőzetes

Az eszköz specifikációi előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A teljes leírás, instrukciók, figyelmeztetések és műszaki jellemzők a TensioMed TensioDay™ kézikönyvében megtalálhatók.

TENSIOMED®

1103 Budapest, Kőér u. 2/e
Tel: (+36-1)433-1700, (+36-1)433-1701 Fax: (+36-1) 433-1709
web: www.tensio.com e-mail: info@tensio.com

A szerzői jogok © 2012 a TensioMed Kft. tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.

PR-TM-D003HU